



## TOYOBO LIFE SCIENCEウェブサイトリニューアルのお知らせ



2015年4月1日にウェブサイトのリニューアルいたしました。もうご覧いただきましたでしょうか。

URL : <http://lifescience.toyobo.co.jp/>

トップページは、探そうとしている製品の入り口がどこにあるか一目でわかるように製品群別に写真や図を載せています。

各製品のページも一新して、カタログを見るような感覚でご覧いただけるよう配置し、実施例、関連製品などの情報の充実を図りました。

右上に検索窓を設け、トップページから製品を探すことができるようになりました。また、詳細検索のコーナーに入っただけで、Code No. キーワードで検索した結果をさらに対象別に絞り込むことも可能です。是非お試しください。




## Santa Cruz Biotechnology CRISPR/Cas9 System

抗体およびその関連製品をはじめ、siRNA、化学品など幅広く取り扱っております Santa Cruz Biotechnology社より、CRISPR/Cas9 System が発売されました。

- ・ CRISPR/Cas9 ノックアウトプラスミドはCas9ヌクレアーゼと高効率なノックアウトが行えるよう設計された3種類のgRNAをコードしたプラスミドのプールから構成されています。
- ・ ヒト、マウス各18,000以上の遺伝子をターゲットとした製品をご用意。精製プラスミドDNAですので、すぐにトランスフェクションを行うことが可能です。
- ・ gRNA配列は、GeCKO (v2) ライブラリー由来です。

また、CRISPR/Cas9 ノックアウトプラスミドとコトランスフェクションを行ってDNA切断部位にピューロマイシン耐性遺伝子を組み込むことで、ノックアウトした細胞の選択が可能となる HDR (Homology-Directed Repair) プラスミド、選択後にピューロマイシン耐性遺伝子を除去するためのCre Vectorもご用意しております。

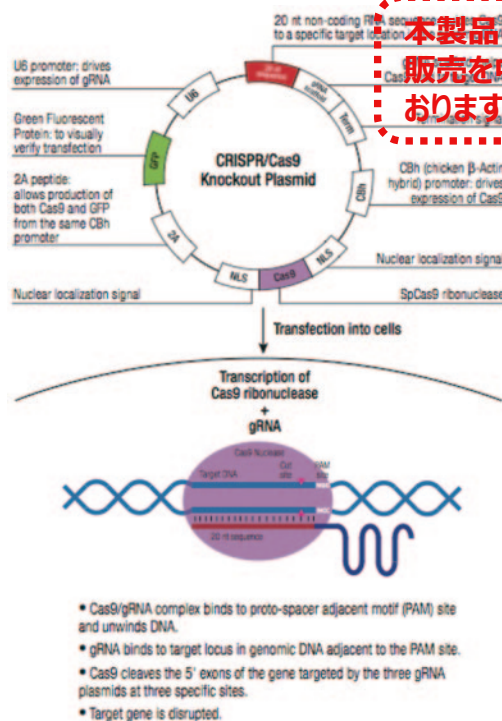

製品の詳細、検索はこちらのサイトからお願いいたします。

URL : [http://www.scbt.com/research/crispr\\_cas9\\_knockout\\_plasmids.html](http://www.scbt.com/research/crispr_cas9_knockout_plasmids.html)